

SuperPole™ Ultra

SP-ULTRA
(DC142 - RevB)

healthcraftproducts.com



SP400HDU




SP-EU




SP403HDU

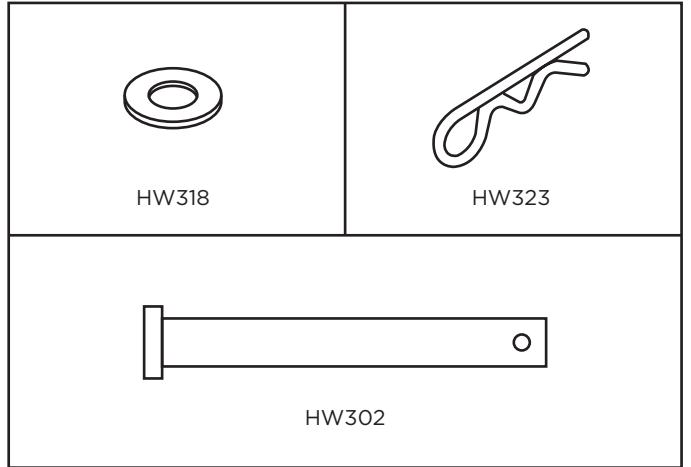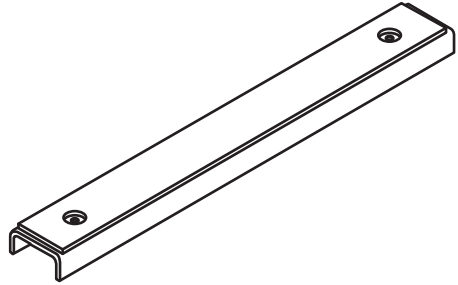

SP402

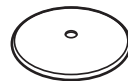


B

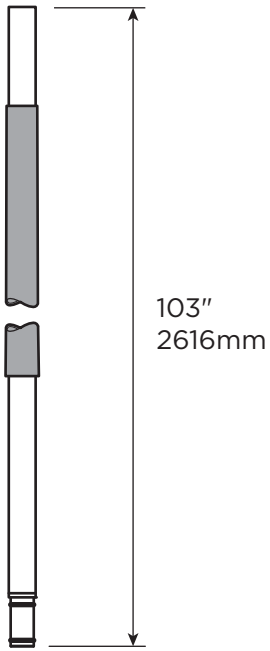


○ ← Ø1.50" / 38.1mm

FE / PVC / NBR
14lbs
6.3kg

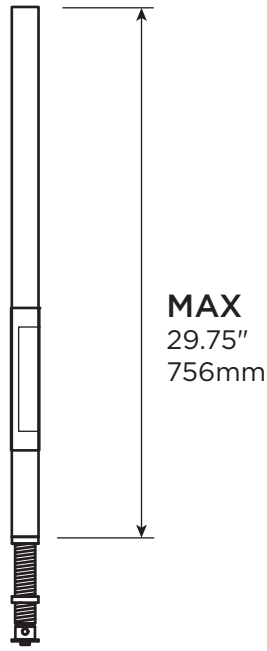

○ ← Ø1.50" / 38.1mm


FE / PVC / UHMW
8lbs
3.6kg

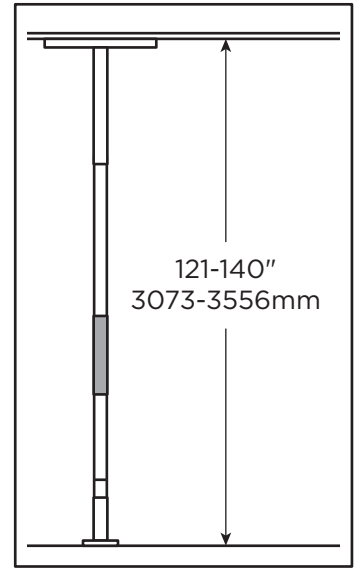


MAX
300lbs
136kg

C

1

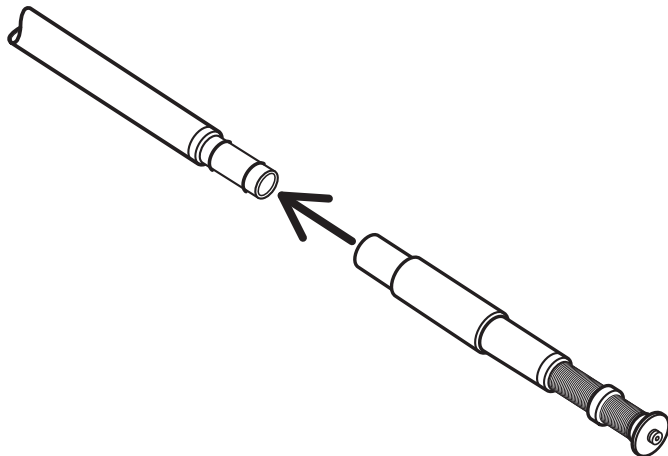

2

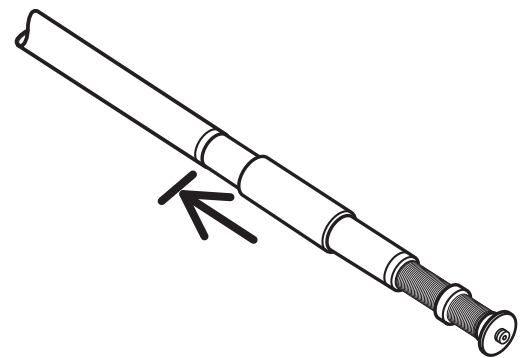

OVERVIEW

Thank you for choosing the SuperPole Ultra from HealthCraft. Please read and understand the instructions in this manual (and the SuperPole Manual DC100); keep manuals for future reference.

The SuperPole Ultra is a high quality, commercial grade floor to ceiling safety pole (intended usage same as SuperPole). The SuperPole Ultra is intended for applications with floor to ceiling ranges from 121-140" / 3073-3556mm. The SuperPole Ultra is not to be used with the SuperBar, SuperTrapeze, Angled Ceiling Plate or Uni-Fit Extender. The SuperPole Ultra parts (pole, extension tube and top plate - labelled for convenience) should not be used with the components of any other floor to ceiling poles. The SuperPole Ultra is not to be used in any other way than described above. The SuperPole Ultra is covered under SuperPole warranty (DC100). Specifications subject to change without notice.

DELIVERY CONTENTS

FIGURE A.

1. SP400HDU - Ultra Pole
2. SP-EU - Custom Cut Extension Tube
3. SP403HDU - Ultra Top Plate
4. SP402 - Base Plate

TECHNICAL DATA

See Figure B.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

FIGURE C.

1. Insert the end of the Ultra pole with the o-rings into the custom extension tube.
2. To ensure a snug fit, ensure there is no gap between the bottom shoulder of the Ultra pole and the extension tube. If required, use a hammer to tap the poles together (note: Use a wood block in between the hammer and extension screw to prevent damage).
3. Continue with SuperPole instructions (DC100).

APERÇU

Nous vous remercions d'avoir opté pour la SuperPole Ultra de HealthCraft. Veuillez lire et vous familiariser avec les instructions du présent manuel (ainsi que le manuel de la SuperPole DC100); veuillez conserver ce manuel pour consultation ultérieure.

La SuperPole Ultra est un poteau de sécurité d'une grande qualité commerciale et qui s'installe entre le sol et le plafond (utilisation similaire à la SuperPole). La SuperPole Ultra doit être installée entre le sol et le plafond dont les hauteurs correspondent à 3073-3556 mm/121-140 po. La SuperPole Ultra ne doit pas être utilisée avec la SuperBar, le SuperTrapeze, la plaque à angle pour plafond ou l'extenseur Uni-Fit. Les pièces de la SuperPole Ultra (poteau, tube d'extension et plaque supérieur – identifiées d'une étiquette pour votre convenance) ne doivent pas être utilisées avec tout autre poteau s'installant entre le sol et le plafond. La SuperPole Ultra ne doit pas être utilisée autrement qu'il est décrit ci-dessus. La SuperPole Ultra est couverte par la garantie de la SuperPole (DC100). Les caractéristiques peuvent faire l'objet de changement sans préavis.

CONTENU À LA LIVRAISON

FIGURE A.

1. SP400HDU - Ultra Pole
2. SP-EU - Tube d'extension coupé sur mesure
3. SP403HDU - Plaque supérieure Ultra
4. SP402 - Plaque de sol

DONNÉES TECHNIQUES

Voir la Figure B.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

FIGURE C.

1. Insérez l'extrémité de la SuperPole Ultra sur le tube d'extension coupé sur mesure avec les joints toriques.
2. Pour garantir une insertion bien adaptée, assurez-vous qu'il n'y a aucun espace entre la base du poteau et le tube d'extension. Au besoin, utilisez un marteau pour réunir les deux poteaux (Remarque : utilisez un bloc de bois entre le marteau et la vis d'extension afin d'éviter tout dommage).
3. Poursuivez avec les instructions de la SuperPole (DC100).

GENERAL

Gracias por elegir el SuperPole Ultra de HealthCraft. Lea y asegúrese de comprender las instrucciones de este manual (y el Manual DC100 del SuperPole); guarde los manuales para referencia futura.

El SuperPole Ultra es un poste de seguridad del piso al techo de alta calidad y de categoría comercial (con los mismos fines de uso que el SuperPole). El SuperPole Ultra ha sido concebido para ser usado en un rango de altura del piso al techo de 121-140" / 3073-3556 mm. El SuperPole Ultra no se debe usar con la barra SuperBar, el trapecio SuperTrapeze, la placa para techos en ángulo (Angled Ceiling Plate) o el extensor Uni-Fit (Uni-Fit Extender). Las piezas del SuperPole Ultra (poste, tubo extensor y placa superior, etiquetados para su comodidad) no se deben usar con los componentes de ningún otro poste del piso al techo. El SuperPole Ultra no debe usarse de ninguna otra forma fuera de lo antes descrito. El SuperPole Ultra está abarcado por la garantía de SuperPole (DC100). Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

CONTENIDO ENTREGADO

FIGURA A.

1. SP400HDU - Poste Ultra Pole
2. SP-EU - Tubo extensor
3. SP403HDU - Placa superior del Ultra
4. SP402 - Placa base recortado a medida

DATOS TÉCNICOS

Consulte la Figura B.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

FIGURA C.

1. Insertar el extremo del Ultra con las juntas tóricas (o-rings) en el tubo extensor a medida.
2. Para lograr que ajuste bien, comprobar que no haya ningún espacio entre el apoyo inferior del Ultra y el tubo extensor. Si es necesario, usar un martillo para golpear los postes de manera de unirlos (nota: colocar un bloque de madera entre el martillo y el tornillo extensor para evitar daños).
3. Continuar con las instrucciones para el SuperPole (DC100).

